

Anti-CaSR

(extracellular Ca²⁺-sensing receptor)

Code Number : CaSR-GP-Af940 (guinea pig, RRID :)

Size : Size : 20 µg and 50 µg / See label on vial
(affinity-purified with antigen polypeptide)

Formulation : Liquid ; 200 µg/ml in PBS with 0.05% NaN₃.

Storage : Store at cool temp. (2-10°C)


The antibody can be stored at 2-10°C. The antibody can be also aliquotted and stored at -80°C for long-term storage. Avoid repeated freeze-thawing. Non-hazardrous. No MSDS required.

Species : guinea pig, polyclonal

Antigen : mouse, 988-1079aa (AF110178)

Specificity : mouse (others not tested)

Consistent with CaSR mRNA expression, immunohistochemical signals are most intense in the area postrema, with additional fiber labeling in the solitary tract nucleus , trigeminal spinal tract, and lateral reticular nucleus. In the periphery, CaSR is strongly detected in [Ca²⁺]-regulating hormone-producing cells in the thyroid (parafollicular cells) and parathyroid glands.

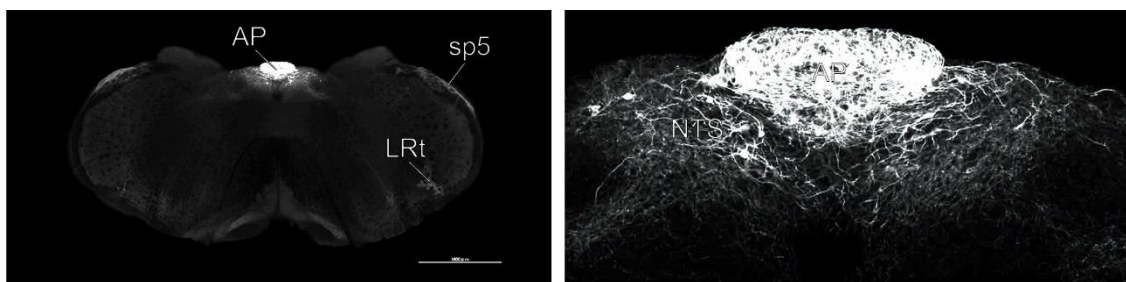

Applications : In general, affinity-purified antibody is used at around 1 microgram/ml for immunoblot and immunohistochemistry. The most appropriate concentration should be determined by users, because it depends on contents in given cells, tissues and organs.

Research Use : For research use only, not for use in diagnostic procedures.

ご注意 : 本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。

Distributor : [NITTOBO MEDICAL CO., LTD](http://www.nittobogrp.com) Manufacture : FRONTIER INSTITUTE CO., LTD
TEL : +81-(0)3-4582-5451 email : nmd-tokuhan@nittobogrp.com

Remarks :

Reference :

ご注意：本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。

Distributor : [NITTOBO MEDICAL CO., LTD](#) Manufacture : FRONTIER INSTITUTE CO., LTD
TEL : +81-(0)3-4582-5451 email : nmd-tokuhan@nittobogrp.com