

Anti-Calretinin

Product Information:

1) Catalog #:	MSFR100440
Item Name:	Calretinin pAb (Rb) 20ug
Size :	20µg (affinity-purified with antigen polypeptide)
Species :	Rabbit
Product Code :	calretinin-Rb-Af200
RRID :	AB_2571666
2) Catalog #:	MSFR100450
Item Name:	Calretinin pAb (Rb) 50ug
Size :	50µg (affinity-purified with antigen polypeptide)
Species :	Rabbit
Product Code :	calretinin-Rb-Af200
RRID :	AB_2571666

Formulation : Liquid ; 200µg/ml in PBS with 0.05% NaN₃.

Storage : Store at cool temp (2-10°C).

The antibody can be stored at 2-10°C. The antibody can be also aliquoted and stored at -80°C for long-term storage. Avoid repeated freeze-thawing. Non-hazardous. No MSDS required.

Species : rabbit, polyclonal

Antigen : mouse Calretinin, 1-271 aa (AB037969)


ご注意 : 本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。

Distributor : NITTOBO MEDICAL CO., LTD
TEL : +81-(0)3-4582-5451
email : nmd-tokuhan@nittobogrp.com

Manufacture : FRONTIER INSTITUTE CO., LTD

Specificity : mouse (others not tested)

Immunoblot detects a single protein band at 30 kDa.

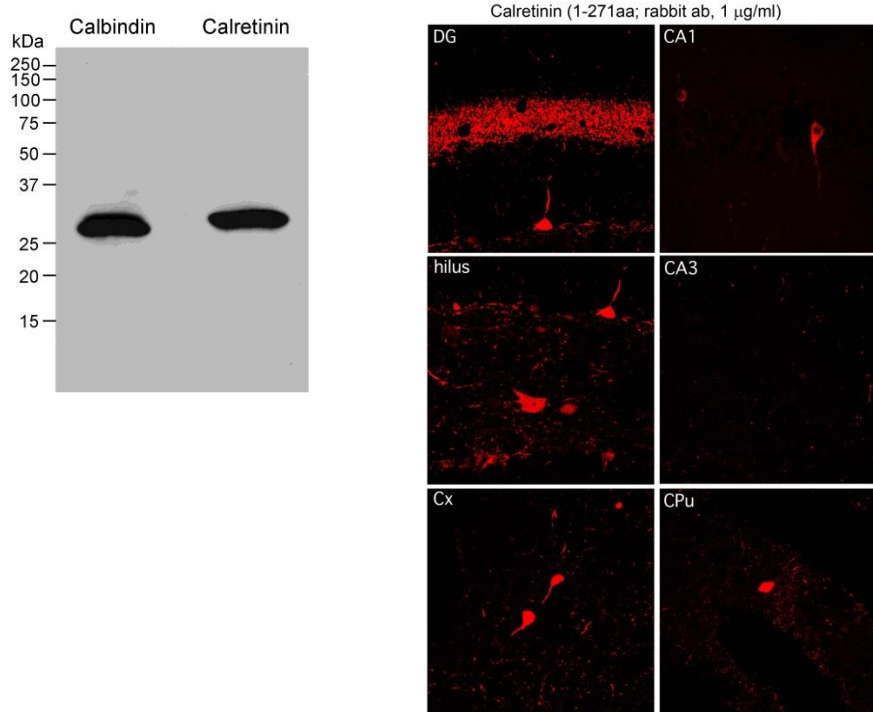

Applications : Affinity-purified antibody is used at around 1 microgram/ml for immunoblot and immunohistochemistry. The most appropriate dilution in given tissues should be determined by users, because it depends on contents in given cells, tissues and organs.

Research Use : For research use only, not for use in diagnostic procedures.

Remarks :

Reference :

Miyazaki T , Yamasaki M , Tanaka KF , Watanabe M (2021) Compartmentalized input-output organization of Lugaro cells in the cerebellar cortex. *Neuroscience* 462:89-105.

ご注意 : 本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。

Distributor : NITTOBO MEDICAL CO., LTD
TEL : +81-(0)3-4582-5451
email : nmd-tokuhan@nittobogrp.com

Manufacture : FRONTIER INSTITUTE CO., LTD