

Anti-NAPE-PLD

(*N*-acylphosphatidylethanolamine-hydrolyzing phospholipase D)

Product Information:

1) Catalog #:	MSFR104270
Item Name:	NAPE-PLD pAb (GP) 20ug
Size :	20μg (affinity-purified with antigen polypeptide)
Species :	Guinea pig
Product Code :	NAPE-PLD-GP-Af720
RRID :	AB_2571806
2) Catalog #:	MSFR104280
Item Name:	NAPE-PLD pAb (GP) 50ug
Size :	50μg (affinity-purified with antigen polypeptide)
Species :	Guinea pig
Product Code :	NAPE-PLD-GP-Af720
RRID :	AB_2571806

Formulation : Liquid ; 200 μg/ml in PBS with 0.05% NaN₃.

(affinity-purified with antigen polypeptide)

Storage : Store at cool temp (2-10°C).


The antibody can be stored at 2-10°C. The antibody can be also aliquoted and stored at -80°C for long-term storage. Avoid repeated freeze-thawing. Non-hazardous. No MSDS required.

Species : guinea pig, polyclonal

Antigen : mouse N-terminal 1-41aa
(AB112350)

Specificity : mouse (others not tested)

Immunoblot detects a protein band around at 45 kDa. This selectively wild-type mouse brains, but not NAPE-PLD-knockout brains by immunohistochemistry.

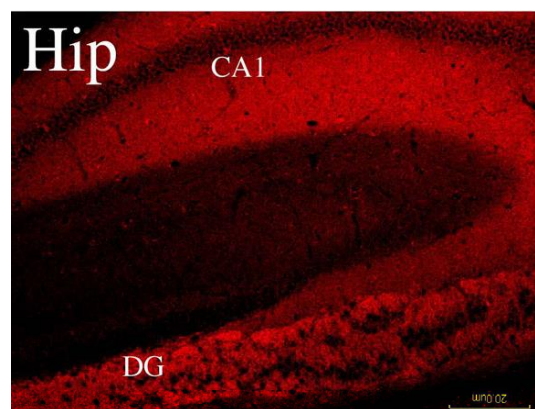

Applications : In general, affinity-purified antibody is used at around 1 microgram/ml for immunoblot and immunohistochemistry. The most appropriate concentration should be determined by users, because it depends on contents in given cells, tissues and organs.

Research Use : For research use only, not for use in diagnostic procedures.

ご注意 : 本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。

Remarks :

Reference : Nyilas R, Dudok B, Urbán GM, Mackie K, Watanabe M, Cravatt BF, Freund TF, Katona I: Enzymatic machinery for endocannabinoid biosynthesis associated with calcium stores in glutamatergic axon terminals. **J Neurosci** 28:1058-1063, 2008

ご注意：本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。

Distributor : NITTOBO MEDICAL CO., LTD
TEL : +81-(0)3-4582-5451
email : nmd-tokuhan@nittobogrp.com

Manufacture : FRONTIER INSTITUTE CO., LTD