

Anti-PLC β 1

(phospholipase C β 1)

Product Information:

1) Catalog #:	MSFR104910
Item Name:	PLC β 1 pAb (Go) 20ug
Size :	20 μ g (affinity-purified with antigen polypeptide)
Species :	Goat
Product Code :	PLCb1-Go-Af1000
RRID :	AB_2571827
2) Catalog #:	MSFR104920
Item Name:	PLC β 1 pAb (Go) 50ug
Size :	50 μ g (affinity-purified with antigen polypeptide)
Species :	Goat
Product Code :	PLCb1-Go-Af1000
RRID :	AB_2571827
3) Catalog #:	MSFR104930
Item Name:	PLC β 1 pAb (GP) 10ug
Size :	10 μ g (10 μ g only)
Species :	Guinea pig
Product Code :	PLCb1-GP-Af508
RRID :	AB_2571828

Formulation : Liquid ; 200 μ g/ml in PBS with 0.05% NaN₃.
(affinity-purified with antigen polypeptide)

Storage : Store at cool temp (2-10°C).

The antibody can be stored at 2-10°C. The antibody can be also aliquoted and stored at -80°C for long-term storage. Avoid repeated freeze-thawing. Non-hazardous. No MSDS required.


Species : guinea pig / goat, polyclonal

Antigen : mouse PLC β 1, 36-87 aa (TIVTPTILRTDPQGFFFYWTDQNKETELLDLSL
VKDARCGKHAEAPKDPKLR, NM_019677)

ご注意 : 本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。

Specificity : mouse (others not tested)

Immunoblot detects a major band at 150 kDa and a minor band at 145kDa. The specificity was verified by blank immunostaining in PLC β 1-KO brains. See the below reference for immunoblot and immunohistochemistry.

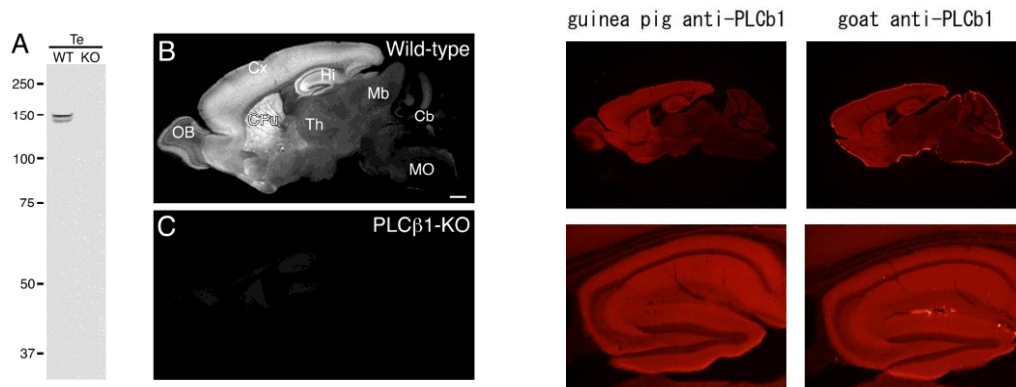

Applications : In general, affinity-purified antibody is used at around 1 microgram/ml for immunoblot and immunohistochemistry. The most appropriate concentration should be determined by users, because it depends on contents in given cells, tissues and organs. In use of cryosections and microslicer sections, pretreatment of dipping sections in 1:3 methanol, 3:1 methanol, and pure methanol for 3 min each will greatly enhance immunohistochemical signals for PLC β .

Research Use : For research use only, not for use in diagnostic procedures.

Remarks : Guinea pig antibody yields slightly higher signals than goat one, but its stock is small and limited.

Reference : Fukaya M, Uchigashima M, Nomura S, Hasegawa Y, Kikuchi H, Watanabe M: Predominant expression of phospholipase C β 1 in telencephalic principal neurons and cerebellar interneurons, and its close allocation with related signaling molecules in somatodendritic neuronal elements. *Eur J Neurosci*, 28:1744-1759, 2008.

2) Hozumi Y, Fukaya M, Adachi N, Saito N, Otani K, Kondo H, Watanabe M, Goto K: Diacylglycerol kinase beta accumulates on the perisynaptic site of medium spiny neurons in the striatum. *Eur J Neurosci*, 28:2409-2422, 2008.

3) Tanimura A, Yamazaki M, Hashimotodani Y, Uchigashima M, Kawata S, Abe M, Kita Y, Hashimoto K, Shimizu T, Watanabe M, Sakimura K, Kano M: The endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol produced by diacylglycerol lipase α mediates retrograde suppression of synaptic transmission. *Neuron* 65:320-32, 2010.

ご注意 : 本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。