

Anti-VGluT2

(vesicular glutamate transporte-2)

Product Information:

1)	Catalog #:	MSFR106260
	Item Name:	VGluT2 pAb (Go) 20ug
	Species :	20µg (affinity-purified with antigen polypeptide)
	Size :	Goat
	Product Code :	VGluT2-Go-Af310
	RRID :	AB_2571620
2)	Catalog #:	MSFR106270
	Item Name:	VGluT2 pAb (Go) 50ug
	Species :	50µg (affinity-purified with antigen polypeptide)
	Size :	Goat
	Product Code :	VGluT2-Go-Af310
	RRID :	AB_2571620
3)	Catalog #:	MSFR106280
	Item Name:	VGluT2 pAb (GP) 20ug
	Species :	20µg (affinity-purified with antigen polypeptide)
	Size :	Guinea pig
	Product Code :	VGluT2-GP-Af810
	RRID :	AB_2571621
4)	Catalog #:	MSFR106290
	Item Name:	VGluT2 pAb (GP) 50ug
	Species :	50µg (affinity-purified with antigen polypeptide)
	Size :	Guinea pig
	Product Code :	VGluT2-GP-Af810
	RRID :	AB_2571621
5)	Catalog #:	MSFR106300
	Item Name:	VGluT2 pAb (Rb) 20ug
	Species :	20µg (affinity-purified with antigen polypeptide)
	Size :	Rabbit
	Product Code :	VGluT2-Rb-Af860
	RRID :	AB_2571619
6)	Catalog #:	MSFR106310
	Item Name:	VGluT2 pAb (Rb) 50ug
	Species :	50µg (affinity-purified with antigen polypeptide)
	Size :	Rabbit
	Product Code :	VGluT2-Rb-Af860
	RRID :	AB_2571619

Formulation : Liquid ; 200 µg/ml in PBS with 0.05% NaN₃.

Storage : Store at cool temp (2-10°C).



The antibody can be stored at 2-10°C. The antibody can be also aliquoted and stored at -80°C for long-term storage. Avoid repeated freeze-thawing. Non-hazardous. No MSDS required.

Species : rabbit / guinea pig / goat, polyclonal

ご注意：本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。

Antigen : mouse VGluT2, C-terminal 559-582 aa (BC038375)

C-terminal 520-582 aa for VGluT2-Rb-Af860 (BC038375)

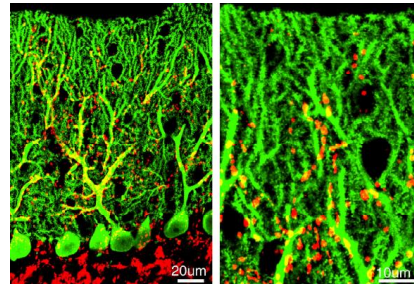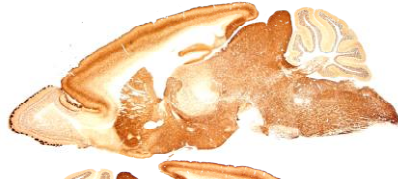

Specificity : mouse (others not tested)

Immunoblot detects a single protein band at 60 kDa. This selectively stains distinct populations of glutamatergic neurons, particularly their terminals. This is also useful marker to visualize climbing terminals innervating Purkinje cells and thalamostriatal afferent terminals.

Applications : In general, affinity-purified antibody is used at around 1 microgram/ml for immunoblot and immunohistochemistry. The most appropriate concentration should be determined by users, because it depends on contents in given cells, tissues and organs.

Research Use : For research use only, not for use in diagnostic procedures.

Remarks :

Reference : 1) Miyazaki, T., Fukaya, M., Shimizu, H., Watanabe, M. (2003) Subtype switching of vesicular glutamate transporters at parallel fiber-Purkinje cell synapses in developing mouse cerebellum. *Eur. J. Neurosci* 17:2563-2572.

2) Kawamura, Y., Fukaya, M., Maejima, T., Yoshida, T., Miura, E., Watanabe, M., Ohno-Shosaku, T., Kano, M. (2006) CB1 is the major cannabinoid receptor at excitatory presynaptic site in the hippocampus and cerebellum. *J. Neurosci.*, 26:2991-3001.

3) Miura, E., Fukaya, M., Sato, T., Sugihara, K., Asano, M., Yoshioka, K., Watanabe, M. (2006) Expression and distribution of JNK/SAPK-associated scaffold protein JSAP1 in developing and adult mouse brain. *J. Neurochem.* 97:1431-1446.

ご注意 : 本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。