

Anti-pan-AMPA

(pan-antibody common to GluR1-4)

Code Number : panAMPA-GP-Af580 (guinea pig, RRID : AB_2571610)

Size : 20 µg and 50 µg / See label on vial
(affinity-purified with antigen polypeptide)

Formulation : Liquid ; 200 µg/ml in PBS with 0.05% NaN₃.


Storage : Store at cool temp (2-10°C).

The antibody can be stored at 2-10°C. The antibody can be also aliquotted and stored at -80°C for long-term storage. Avoid repeated freeze-thawing. Non-hazardrous. No MSDS required.

Species : guinea pig, polyclonal

Antigen : mouse (antigen, 717-754 aa ,LLE
STMNEYIEQRKPCDTMKVGGNLDKSG
YGIATPKGS of GluRα1, X57497; affinity,
EQRKPCDTMKVGGNLDKSG common to
GluRα1-4)

Specificity : mouse (others not tested)
Immunoblot detects a single band at 100kDa.

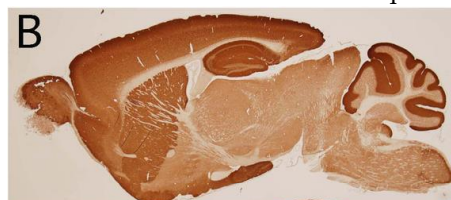

Applications : In general, affinity-purified antibody is used at around 1 microgram/ml for immunoblot and immunohistochemistry. The most appropriate concentration should be determined by users, because it depends on contents in given cells, tissues and organs.

Research Use : For research use only, not for use in diagnostic procedures.

Remarks : For immunohistochemistry for neuronal iGluRs, users should adopt postembedding immunogold for electron microscopic detection and protease predigestion for light microscopic detection (see the below reference). For glial GluR, these antigen-exposing methods are not necessary (unpublished information).

Reference : Fukaya, M., Tsujita, M., Yamazaki, M., Kushiya, E., Abe, M., Akashi, K., Natsume,

ご注意 : 本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。

R., Kano, M., Kamiya, H., Watanabe, M. *, Sakimura, K. Abundant distribution of TARP γ -8 in synaptic and extrasynaptic surface of hippocampal neurons and its major role in AMPA receptor expression on spines and dendrites. **Eur. J. Neurosci.**, 24:2177-2190.

ご注意：本商品には 0.1 % 未満のアジ化ナトリウムが入っています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は大量の水で洗い流してください。

Distributor : NITTOBO MEDICAL CO., LTD
TEL : +81-(0)3-4582-5451
email : nmd-tokuhan@nittobogrp.com

Manufacture : FRONTIER INSTITUTE CO., LTD